

TERMO DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 (um) ano, contado a partir da data da emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme de orientações descritas no (ou neste) manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto enviado, passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto, será cobrado o consento e nossa central entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento cobrado. O produto deverá estar acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente, e todos os acessórios que possui.

O produto deverá estar devidamente embalado. Caso não for possível o reparo de seu produto, garantimos a substituição do mesmo. Nosso prazo para devolução é de 30 dias corridos a partir do recebimento do produto.

A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções;

O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza, ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Relaxmedic Importação Exportação Ltda.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Central de Atendimento ao Consumidor

Ligue (11) 3393-3688



Relaxmedic



MASSAGEADOR CELLTECH

Modelo: RM-MC0500

A beleza de viver bem

Manual de instruções

Índice

Descrição dos símbolos	1
Conhecendo seu aparelho	3
Advertências	3
Informações de segurança	4
Descrição do aparelho	5
Operação	6



Garantia de 1 ano.

Nome do produto: _____ Data: _____

Nome da Loja: _____ N : da nota fiscal: _____

Nome: _____ RG: _____

End. Residencial: _____

Nº: _____ Comple.: _____ Estado: _____ CEP: _____

Data da compra: _____ Telefone de contato: _____

INSTRUÇÕES DE USO

Descrição dos símbolos

Os seguintes símbolos são utilizados no manual de instruções e na placa de identificação do produto:

- ADVERTÊNCIA: Risco de ferimentos ou perigos à saúde.
- ATENÇÃO: Informações de segurança sobre possíveis danos ao aparelho/ acessórios.
- Observações Informações importantes.
- O aparelho possui isolamento duplo e, portanto está em conformidade com a classe de proteção 2.
- Usar somente em ambientes fechados.

1. CONHECENDO SEU APARELHO

O aparelho MASSAGEADOR CELLTECH proporciona a você uma massagem profunda e eficiente. Seu potente motor garante uma forte massagem do tipo amassamento. Este complexo movimento permite a massagem profunda da musculatura.

Com a função amassamento, o aparelho imita os movimentos das mãos realizados durante uma massagem profissional.

Grças ao seu design ergonômico, o aparelho pode ser usado confortavelmente em casa.

2.USO CORRETO

Este aparelho foi projetado somente para a massagem de partes específicas do corpo humano.

Este aparelho é somente para uso privado e não é destinado para fins médicos ou comerciais.

Não substitua nenhum tratamento médico.

Não use o massageador se qualquer das advertências abaixo se aplicar a você.

Consulte seu médico se não tiver certeza de que este aparelho é adequado para você.

3.ADVERTÊNCIAS

O uso do massageador é proibido nos seguintes casos:

- Em crianças.
- Em animais.
- Não usar em alterações causadas por doenças ou lesões na região das costas (ex: problemas de disco, feridas abertas, etc.).
- Nunca use o aparelho para massagear a região do coração de portadores de marca-passo.
- Nunca use o massageador sobre a pele ou partes do corpo inchadas, queimadas, inflamadas ou feridas.
- O aparelho não deve ser usado sobre feridas dilaceradas, áreas capilares, varizes, acnes, rosáceas, herpes ou outras doenças da pele.
- O aparelho não deve ser utilizado durante a gravidez.
- Não use o massageador no rosto (olhos), na laringe ou em outras partes do corpo particularmente sensíveis.
- Não use próximo a região da cabeça e ou nuca pois pode entrar os cabelos
- Não use o aparelho para massagear os pés.
- Nunca use o aparelho durante o sono.
- Nunca use o aparelho depois de tomar remédios ou consumir álcool (redução dos níveis de consciência).
- Não use no carro.

Este aparelho não foi projetado para uso por pessoas (inclusive crianças) com restrições físicas, sensoriais ou mentais e/ou por pessoas sem a compreensão necessária do equipamento e de como utilizá-lo, salvo se elas forem supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou se receberem instruções sobre o uso do aparelho.

Crianças deverão ser supervisionadas para garantir que não usem o aparelho como brinquedo.

Seu médico deverá ser consultado antes do uso do massageador se você:

- Sofrer de uma doença grave ou estiver se recuperando de uma operação na parte superior do corpo.
- Portar marca-passo, implante ou outro auxílio.

1

- Tiver trombose,
- Tiver diabetes,
- Sentir dores com causa não diagnosticada.

O aparelho foi projetado somente para a finalidade descrita neste manual de instruções. O fabricante não pode ser considerado responsável por danos decorrentes do uso inadequado ou negligente deste produto.

4. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia este manual de instruções com atenção. A inobservância das informações fornecidas abaixo pode resultar em danos pessoais ou materiais. Mantenha este manual de instruções em local seguro onde também possa ser lido por outras pessoas que usarem este aparelho. Sempre entregue o manual de instruções junto com o aparelho se você vendê-lo ou passá-lo adiante.

ADVERTÊNCIA

Mantenha as crianças longe do material da embalagem. Risco de sufocamento.

Choque elétrico

ADVERTÊNCIA

Como qualquer outro aparelho elétrico, este massageador deverá ser manuseado com o devido cuidado e atenção a fim de evitar o risco de choque elétrico.

Por este motivo, o aparelho deverá ser operado somente da seguinte forma:

- Somente com a fonte de alimentação fornecida com o produto e na voltagem indicada na fonte.
- Não use o massageador em caso de danos no aparelho ou em qualquer de seus acessórios.
- Nunca use o aparelho durante uma tempestade.

Em caso de defeito ou mau-funcionamento, desligue o aparelho imediatamente e retire-o da tomada.

Nunca puxe pelo cabo ou pelo aparelho para desconectar o massageador da tomada.

Nunca segure ou carregue o aparelho pelo cabo. Mantenha o cabo longe de superfícies quentes.

Não aperte, dobre ou torça o cabo. Não insira pinos, alfinetes ou objetos pontiagudos.

Certifique-se de que o massageador, o interruptor, a fonte de alimentação e o cabo não entrem em contato com a água, umidade ou outros líquidos. Portanto, use o aparelho somente em ambientes secos e fechados (ex: nunca no banheiro, sauna, etc.).

Nunca tente pegar o aparelho se ele cair na água. Desligue o plugue da tomada imediatamente.

Não use o massageador em caso de danos no aparelho ou em qualquer de seus acessórios.

Evite que o aparelho sofra impacto ou quedas.

Reparos

ADVERTÊNCIA

- Reparos em aparelhos elétricos devem ser executados somente por pessoas qualificadas.
- Nunca use o aparelho se não tiver conhecimento técnico para o usuário.
- Em caso de reparo, procure nossa assistência técnica ou um distribuidor autorizado.
- Se a fonte ou o cabo de alimentação estiver danificado, este deverá ser substituído em um distribuidor autorizado.

Risco de incêndio

ADVERTÊNCIA

Há risco de incêndio se o aparelho for usado incorretamente ou se não for usado de acordo com este manual de instruções.

Por este motivo, o aparelho deverá ser operado somente da seguinte forma:

- Nunca use o aparelho sob cobertores, tais como mantas ou almofadas.
- Nunca use o aparelho perto de gasolina ou outros materiais facilmente inflamáveis.

Manuseio

ATENÇÃO

Desligue o aparelho e retire-o da tomada após cada utilização e antes de cada limpeza.


- Nunca insira objetos nas aberturas do aparelho e nunca insira nada nas partes giratórias.
- Certifique-se que todas as partes móveis podem se mover livremente a qualquer momento.

- Mantenha o aparelho longe de altas temperaturas.

2

5.DESCRICÃO DO APARELHO

Aparelho Celltech

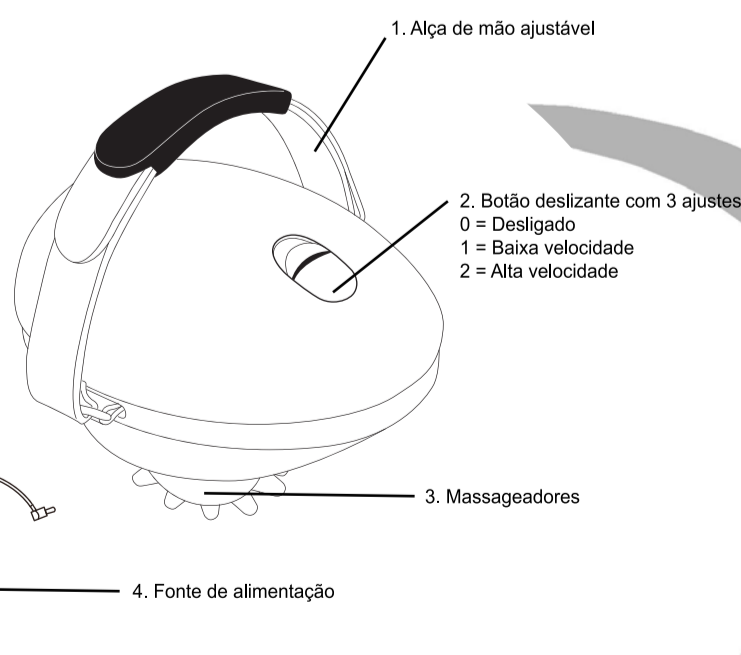

6. INICIALIZAÇÃO

- Tire o produto da embalagem
- Verifique se há danos no aparelho, fonte de alimentação e cabos.
- Ligue o plugue da fonte de alimentação no aparelho e a outra ponta na tomada.

7. OPERAÇÃO

Pressione o massageador com cuidado contra a parte do corpo que deseja massagear.

Interrompa a massagem ou mude sua posição ou a pressão do contato se você sentir alguma dor ou desconforto.

Não prenda nem force qualquer parte do seu corpo, principalmente seus dedos, entre os massageadores giratórios.

Ligue o massageador através do botão deslizante. Os massageadores começarão a girar.

Você pode escolher entre as velocidades baixa e alta. Para desligar o aparelho, deslize o botão até a posição 0.

3

OBSERVAÇÃO

- Não use o massageador por mais de 15 minutos. Caso contrário, o uso prolongado poderá sobre-estimular os músculos e causar tensão em vez de relaxamento.
- Não use próximo a região da cabeça e ou nuca, risco de enrolar com os cabelos.

8. CUIDADOS E ARMAZENAMENTO

LIMPEZA

ADVERTÊNCIA

- Antes de limpar o massageador, desligue a fonte de alimentação da tomada e do aparelho.
- Limpe o aparelho somente da maneira especificada. Nunca permita a entrada de líquidos ou fluidos no aparelho ou acessórios.
- Os massageadores podem ser removidos puxando-os firmemente. O suporte dos massageadores pode ser limpo sob água quente com uma escova macia e um pouco de detergente líquido. O aparelho pode ser limpo com um pano macio, levemente umedecido.
- Só use o aparelho novamente quando ele estiver completamente seco.

ARMAZENAMENTO

Se você não for usar o aparelho por um longo período, recomendamos armazená-lo em sua embalagem original em local seco e sem nenhum peso sobre ele.

4