

# Relaxmedic




**CINTA MASSAGEADORA  
MULTIFUNCIONAL  
Modelo: RM-CM150**

A beleza de viver bem

**Manual de Instruções**

# Índice

RECURSOS	2
CINTA MASSAGEADORA MULTIFUNCIONAL	3
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	4
FUNÇÕES	4
DESCRIÇÃO DO CONTROLE	6
ADVERTÊNCIAS	7

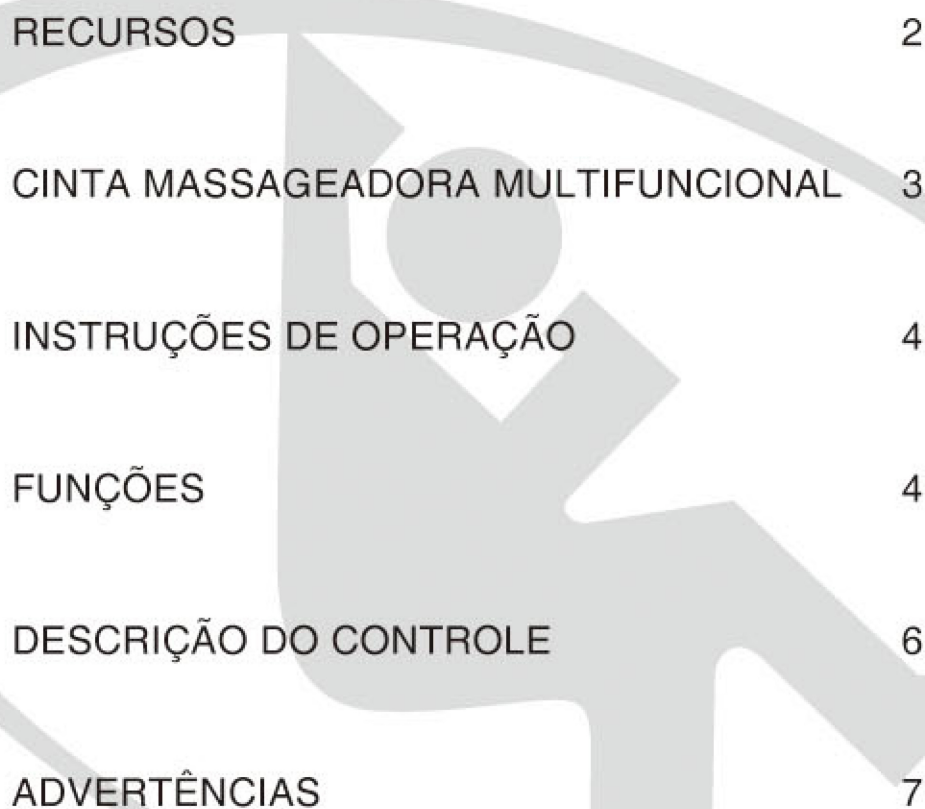

Obrigado por adquirir esta Cinta Massageadora Multifuncional com Aquecimento. Leia com atenção este manual de instruções antes de operar o aparelho e guarde-o bem para referência futura.

### RECURSOS

- Com 4 programas de massagem exclusivos: Rítmica, Vibratória, Pressão e Martelo, é superior à massagem tradicional. Com 6 cilindros massageadores oferece massagem vibratória e por pressão, martelo único e função de aquecimento opcional.
- 3 níveis de intensidade (o padrão é intensidade alta).
- Função Desligamento Automático após 10 minutos.



## CINTA MASSAGEADORA MULTIFUNCIONAL

Esta Cinta Massageadora poderá ajudar a aumentar sua circulação sanguínea, estimular o metabolismo e melhorar sua saúde. É sua melhor opção!

Você poderá usar este aparelho nas seguintes partes do corpo:



**Pescoço**



**Lombar**



**Abdômen**



**Bumbum**



**Coxa**

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

**POWER (Ligar/Desligar):** O aparelho ficará em modo de espera (*standby*) sob duas condições: Primeira, ao pressionar este botão após ligar a unidade na tomada. Segunda, ao pressionar este botão enquanto a cinta estiver em operação. Para desligar o aparelho, pressione este botão por 2 segundos até ouvir um sinal sonoro.

## FUNÇÕES

### 4 PROGRAMAS AUTOMATICOS:

1. **Modo Abdômen.** Ao pressionar este botão, a cinta executará este programa automaticamente. A intensidade padrão é alta. Pressione novamente este botão para alternar para intensidade baixa e pressione mais uma vez para intensidade média. Você poderá escolher três opções de intensidade.
2. **Modo Bumbum.** Ao pressionar este botão, a cinta executará este programa automaticamente. A intensidade padrão é alta. Pressione novamente este botão para alternar para intensidade baixa e pressione mais uma vez para intensidade média. Você poderá escolher três opções de intensidade.
3. **Modo Coxa.** Ao pressionar este botão, a cinta executará este programa automaticamente. A intensidade padrão é alta. Pressione novamente este botão para alternar para intensidade baixa e pressione mais uma vez para intensidade média. Você poderá escolher três opções de intensidade.
4. **Modo Lombar.** Ao pressionar este botão, a cinta executará este programa automaticamente. A intensidade padrão é alta. Pressione novamente este botão para alternar para intensidade baixa e pressione mais uma vez para intensidade média. Você poderá escolher três opções de intensidade.

### 3 PROGRAMAS MANUAIS:

1. **Modo Martelo.** Ao pressionar este botão, a cinta executará este programa automaticamente. A intensidade padrão é alta. Pressione novamente este botão para alternar para intensidade baixa e pressione mais uma vez para intensidade média. Você poderá escolher três opções de intensidade.
2. **Modo Pressão.** Ao pressionar este botão, a cinta executará este programa automaticamente. A intensidade padrão é alta. Pressione novamente este botão para alternar para intensidade baixa e pressione mais uma vez para intensidade média. Você poderá escolher três opções de intensidade.
3. **Modo Duplo.** Ao pressionar este botão, a cinta executará este programa automaticamente. A intensidade padrão é alta. Pressione novamente este botão para alternar para intensidade baixa e pressione mais uma vez para intensidade média. Você poderá escolher três opções de intensidade.

#### **Função Aquecimento:**

Pressione o botão Heat para ativar a função Aquecimento. Os cilindros massajeadores ficarão avermelhados. A função Aquecimento poderá ser selecionada em qualquer modo de massagem. Pressione novamente para desativar esta função.

#### **Duração da Sessão**

10 Minutos

## DESCRIÇÃO DO CONTROLE



## Advertências

Para evitar riscos e mau funcionamento, leia as todas as instruções e advertências antes de usar o aparelho.

1. Se estiver sob tratamento médico, consulte seu médico antes de usar o massageador.
2. Não use o massageador em locais com pouca ventilação, por exemplo, debaixo de cobertores e travesseiros. Isto poderá provocar superaquecimento e causar incêndio ou choque elétrico.
3. Interrompa imediatamente o uso do massageador em caso de superaquecimento provocado pelo uso prolongado.
4. Não use o massageador se estiver machucado ou tiver inflamações na pele.
5. Esta unidade não é um aparelho médico nem terapêutico.
6. Pessoas com insensibilidade ou portadoras de necessidades especiais não deverão usar este aparelho.
7. Crianças não deverão usar o massageador sem a supervisão de adultos.
8. Após o uso, retire o plugue da tomada.

## Precauções

1. Não molhe o produto e evite umidade. Isso poderá causar mau funcionamento, incêndio ou choque elétrico.
2. Não use escovas metálicas nem produtos abrasivos tais como solventes, gasolina e produtos semelhantes para limpar a unidade.
3. Interrompa o uso imediatamente em caso de falha ou quebra. Procure uma assistência técnica para reparo. Não tente desmontar ou consertar o aparelho por conta própria. Isto evitará danos ao aparelho bem como choque elétrico.
4. Não faça muita pressão sobre o aparelho, pois isto poderá quebrar o massageador.

## Especificações

Especificações

Nome do Produto: Cinta Massageadora Multifuncional com Aquecimento

Modelo: RM-CM150

Voltagem de Entrada: CA 100-240V

Voltagem de Saída: CC 12V, 4000mA

Potência Nominal: 48W

Desligamento Automático: após 10 minutos

# Garantia de 1 ano.



Nome do produto: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Nome da Loja: \_\_\_\_\_ N° : da nota fiscal: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

End. Residencial: \_\_\_\_\_

N°: \_\_\_\_\_ Comple.: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Data da compra: \_\_\_\_\_ Telefone de contato: \_\_\_\_\_

## TERMO DE GARANTIA

Este produto tem garantia de 1 (um) ano, contado a partir da data da emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme de orientações descritas no (ou neste) manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto enviado, passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto, será cobrado o conserto e nossa central entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento cobrado. O produto deverá estar acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente, e todos os acessórios que possui.

O produto deverá estar devidamente embalado.

Caso não for possível o reparo de seu produto, garantimos a substituição do mesmo.

Nosso prazo para devolução é de 30 dias corridos a partir do recebimento do produto.

### A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

- A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza, ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Relaxmedic Importação Exportação Ltda.

### A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Central de Atendimento ao Consumidor  
Ligue (11) 3393-3688



Relax  
medic®  
A beleza de viver bem.