

HOMEDICS®

FMV-200

MASSAGEADOR DUPLO PARA OS PÉS



* A cor do produto pode variar

MANUAL DE INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES DE GARANTIA

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES IMPORTANTES	03
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES	04
PRECAUÇÕES PARA AS PILHAS	04
INSTALAÇÃO DAS PILHAS	04
INSTRUÇÕES DE USO	05
MANUTENÇÃO	05
LOCALIZAÇÃO DAS PARTES	06
CERTIFICADO DE GARANTIA	07

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, ESPECIALMENTE QUANDO HOVEREM CRIANÇAS NO LOCAL, DEVE-SE CUMPRIR CERTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO AS SEGUINTE:

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

- Este produto não foi desenvolvido para uso médico. Foi desenvolvido somente para proporcionar uma massagem de luxo.
- É necessária a supervisão próxima quanto este produto for utilizado por crianças, ou pessoas inválidas, ou com pessoas incapacitadas, ou próximo a elas.
- Utilize este produto somente para o uso ao qual ele foi desenvolvido e como se descreve neste manual. Não utilize acessórios não recomendados por HoMedics, especialmente nenhum acessório que não acompanhe o produto.
- Não coloque nem guarde o aparelho onde possa cair ou ser puxado para dentro de uma pia ou banheira.
- Não coloque nem deixe cair dentro da água ou de qualquer outro líquido.
- Esta unidade não deve ser utilizada por crianças sem a supervisão de um adulto.
- Desligue o aparelho quando não estiver em uso.
- NUNCA ligue este aparelho se estiver danificado ou se não funciona corretamente. Envie ao Centro de Serviço HoMedics para exame e reparo.
- Mantenha o cabo de energia distantes de superfícies quentes.
- Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico.

PRECAUÇÕES:

Todo Serviço ou Reparo deste produto, deve ser realizado unicamente por profissional de serviço qualificado e autorizado por HoMedics.

PRECAUÇÃO:

Leia as instruções com atenção antes de colocar em funcionamento.

- Se você tem qualquer preocupação em referência a sua saúde, consulte seu médico antes de usar este produto.
- Indivíduos que utilizam Marcapasso, devem consultar o médico antes de usar este produto.
- Pessoas com as seguintes condições devem consultar seu médico antes de utilizar este produto:
 - Gravidez;
 - Diabetes;
 - Doenças do coração;
 - Tumor maligno;
 - Condições que requeiram repouso.
- Se em qualquer momento se apresentar dor ou prurido, suspenda o uso imediatamente e consulte o seu médico.
- NUNCA use este produto diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas, ou sobre erupções cutâneas, ou em uma ferida aberta.
- Não recomendamos seções de massagem de mais de 15 minutos de duração.

PRECAUÇÕES PARA AS PILHAS

- Use somente o tipo e tamanho de pilhas segundo as especificações.
- Quando instalar as pilhas, respeite a posição correta da polaridade "+" e "-". A instalação incorreta das pilhas pode danificar a unidade.
- Não misture tipos de pilhas (Ex.: Alcalinas com Cinc-Carbono).
- Não misture pilhas velhas com pilhas novas.
- Se não for utilizar a unidade por um período prolongado de tempo, retire as pilhas para evitar danos proveniente do vazamento do líquido das pilhas.

INSTALAÇÃO DAS PILHAS

- 1 Pressione firmemente e levante a tampa até você abrir o compartimento de pilhas.
- 2 Instale ou substitua as 2 pilhas "AA" no compartimento de pilhas, seguindo as orientações de polarização indicadas dentro do compartimento.
- 3 Volte a colocar a tampa enganchando a parte inferior primeiro e em seguida pressione o extremo superior da tampa do compartimento de pilhas.

- 1 Desfrute de uma massagem relaxante deslizando os pés para frente e para trás sobre os roletes na parte superior da unidade.
- 2 A massagem com vibração pode ser ativada pressionando o botão **ON/OFF** no centro da unidade.
- 3 Para desligar a massagem, simplesmente pressione o botão **ON/OFF** mais uma vez.

ATENÇÃO:

Não utilize esta unidade em pé. Você só deve utilizar esta unidade se estiver sentado.

PARA LIMPAR

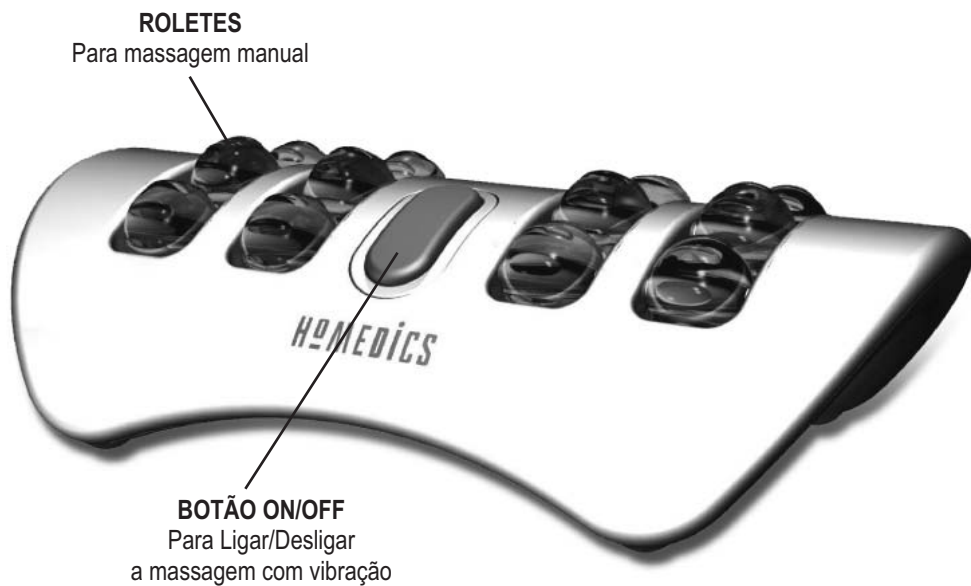
Limpe exclusivamente por partes e com pano suave, apenas umedecido.

Nunca permita que água ou qualquer outro líquido entrem em contato com a unidade.

- Nunca submerja em nenhum líquido para limpar a unidade.
- Nunca utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas, gasolina, querosene, limpa-vidros, lustramóveis ou diluentes de tinta para limpar o produto.
- Não tente reparar a unidade. Não há peças que necessitam serviços por parte do usuário.

PARA GUARDAR

Guarde-o na sua caixa ou em lugar limpo, seco e fresco.

MODELO PORTÁTIL**FUNCIONAMENTO COM PILHAS**

1 pilhas "AA", não inclusas

MASSAGEADOR DUPLO PARA OS PÉS

GARANTIA LIMITADA POR 90 DIAS

HoMEDICS vende seus produtos com a intenção de não apresentar defeitos de fabricação nem de mão de obra por um prazo de noventa dias a partir da data da Nota Fiscal de compra original, com as seguintes exceções. HoMedics dá garantia a seus produtos para que não apresentem defeitos de material nem de mão de obra sob condições normais de uso e serviços. Esta garantia se estende unicamente a consumidores e não a distribuidores.

Para obter serviço para seu produto HoMedics, entre em contato através do fone:

SAC HoMedics
11 3662.5956

Não serão aceitos pagamentos contra a entrega.

HoMedics não autoriza ninguém, incluindo, porém sem limitar-se a, distribuidores, posteriores consumidores compradores do produto de um distribuidor, ou compradores remotos, a obrigar a HoMedics de forma alguma mais além das condições aqui estabelecidas. A garantia deste produto não cobre danos causados por uso inadequado ou abuso, acidente, conexão de acessórios não autorizados, alteração do produto, instalação inadequada, reparos ou modificações não autorizadas, uso inadequado da fonte de energia/eletricidade, corte de energia, queda do produto, funcionamento incorreto ou dano de uma peça de funcionamento devido ao não cumprimento das manutenções recomendadas pelo fabricante, danos durante o transporte, roubo, descuido, vandalismo, condições climáticas, perda do uso em um período durante o qual o produto estiver em uma seção de reparos ou a espera de peças, ou qualquer outra condição, sem importar qual seja, que esteja fora do controle da HoMedics.

Esta garantia é válida unicamente se o produto for comprado e operado no país onde foi adquirido. Um produto que requeira modificações ou adaptações para habilitar seu funcionamento em qualquer país que não seja aquele para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou o reparo de produtos danificados por estas modificações não estão cobertos por esta garantia.

A GARANTIA AQUI ESTABELECIDA SERÁ A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA. NÃO HAVERÁ NENHUMA OUTRA GARANTIA EXPRESSA NEM IMPLÍCITA, INCLUINDO NENHUMA GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTITUDE NEM NENHUMA OUTRA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA COMPANHIA COM RESPEITO A PRODUTOS COBERTOS POR ESTA GARANTIA. HOMEDICS NÃO TERÁ RESPONSABILIDADE ALGUMA POR NENHUM DANO ACIDENTAL, CONSEQUENTE NEM ESPECIAL. SOB NENHUM CONCEITO ESTA GARANTIA REQUERERÁ MAIS QUE O REPARO OU TROCA DE ALGUMA PEÇA OU PEÇAS QUE SE ENCONTREM DEFEITUOSAS DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTA GARANTIA. NÃO SERÃO EFETUADOS REEMBOLSOS. SE NÃO HOUVER PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEIS PARA OS MATERIAS DEFEITUOSOS, HOMEDICS SE RESERVA O DIREITO DE REALIZAR SUBSTITUIÇÕES AO INVÉS DE REPARAR OU TROCAR.

Esta garantia não se estende à compra de produtos abertos, usados, reparados, embalados outra vez e/ou abertos e novamente fechados, incluindo entre outras coisas a venda destes produtos em sites de compra pela internet e/ou a venda destes produtos por revendedores autônomos.

Todas e cada uma das garantias cessarão e terminarão imediatamente com respeito a qualquer produto ou peça do mesmo que estejam reparados, trocados, alterados ou modificados sem o consentimento prévio, explícito e por escrito de HoMedics.

Esta garantia lhe proporciona direitos legais específicos. É possível que você tenha direitos adicionais que podem variar de um país para outro. Devido as regulamentações de certos países, é possível que algumas das limitações e exclusões não se apliquem em seu caso.

Para mais informações com respeito a nossa linha de produtos, visite nosso site:

www.homedics.com