

HOMEDICS®

CUV-200

ALMOFADA DE MASSAGEM LOMBAR AJUSTÁVEL



MANUAL DE INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES DE GARANTIA

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES IMPORTANTES	03
ADVERTÊNCIA	03
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES	04
INSTRUÇÕES DE USO	04
MANUTENÇÃO	05
LOCALIZAÇÃO DAS PARTES	06
CERTIFICADO DE GARANTIA	07

QUANDO UTILIZAR PRODUTOS ELÉTRICOS, ESPECIALMENTE QUANDO HAJA CRIANÇAS PRESENTE, DEVE-SE CUMPRIR CERTAS PRECAUÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO O SEGUINTE:

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

- Sempre desconecte o aparelho da tomada de energia, imediatamente após o uso e antes de limpá-lo.
- NÃO tente pegar um produto que tenha caído na água. Desconecte-o imediatamente.
- NÃO utilize o produto enquanto toma banho ou ducha.
- NÃO coloque nem guarde o produto onde possa cair ou ser derrubado dentro de uma banheira ou pia. NÃO coloque nem deixe cair em água ou qualquer outro líquido.
- NUNCA utilize alfinetes ou outros fixadores metálicos com este produto.
- Mantenha-o seco - NÃO o utilize se estiver molhado ou em condições de umidade.

ADVERTÊNCIA

PARA REDUZIR OS RISCOS DE QUEIMADURA, CHOQUES ELÉTRICOS, INCÊNDIO OU LESÕES PESSOAIS:

- Um produto NUNCA deve ser deixado sem atenção quando conectado à rede elétrica. Desconecte da tomada de corrente elétrica quando não estiver usando e antes de colocar ou tirar peças.
- É necessário supervisão estrita, quando este produto for utilizado por ou próximo de: crianças, pessoas inválidas ou incapacitadas.
- Utilize este produto somente para o uso para o qual foi desenvolvido e como descrito no manual.
- NUNCA faça funcionar este aparelho se o cabo de alimentação ou o plugue danificado, se não estiver funcionando adequadamente, se sofreu uma queda ou se danificou, ou se deixou cair na água. Envie o produto ao Centro de Serviços HoMedics para que examinem e reparem.
- Utilize as superfícies quentes com cuidado. Podem causar queimaduras graves. NÃO utilize sobre áreas sensíveis da pele ou com má circulação. A utilização do calor por crianças e pessoas com incapacidade, sem supervisão, pode ser perigoso.
- Mantenha o cabo distante de superfícies quentes.
- NUNCA utilize enquanto dorme nem adormeça enquanto utiliza o massageador.
- NUNCA deixe cair ou insira nenhum tipo de objeto em nenhuma abertura de ar.
- NÃO ligue o aparelho onde se utilizam produtos de spray aerossol ou administrando oxigênio.
- NÃO utilize este produto sob uma manta ou almofada. Pode ocasionar o superaquecimento.
- NÃO transporte este produto segurando pelo cabo, nem utilize o cabo com alça.
- Para desconectar, coloque todos os controles na posição OFF (desligado) e retire o plugue da tomada da parede.
- Este aparelho foi desenvolvido exclusivamente para uso doméstico e NÃO PROFISSIONAL.
- NÃO utilize ao ar livre.
- Dependendo do ajuste dos controles, pode produzir temperaturas suficientemente elevadas para provocar queimaduras.
- NÃO utilize com Bebê, pessoa inválida ou que esteja dormindo ou inconsciente.
- NÃO emasse o produto e evite dobras.

PRECAUÇÃO - LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE COLOCAR O PRODUTO EM FUNCIONAMENTO.

- Este produto não foi desenvolvido para uso médico. Foi desenvolvido exclusivamente para proporcionar uma massagem de luxo.
- Consulte seu médico antes de utilizar este produto se:
 - Você estiver grávida;
 - Possuir um marcapasso;
 - Tiver qualquer dúvida sobre sua saúde.
- NÃO recomendamos a utilização por pessoas com DIABETES.
- NUNCA deixe o aparelho sem vigilância, especialmente com crianças por perto.
- NUNCA cubra o aparelho enquanto estiver ligado.
- NÃO use este produto por tempo superior a 15 minutos.
- O uso prolongado pode causar um reaquecimento do produto e diminuir sua vida útil. Se isto acontecer, desligue a unidade e permita que esfrie antes de tornar a ligá-la.
- NUNCA use este produto diretamente sobre áreas inchadas ou inflamadas, ou sobre erupções cutâneas.
- NÃO utilize este produto como substituto de atenção médica.
- NÃO utilize este produto antes de ir dormir. A massagem tem efeito estimulante e pode retardar o sono.
- Este produto NUNCA deve ser utilizado por um indivíduo que tenha algum transtorno físico que possa limitar a capacidade do usuário de manejar os controles.
- Esta unidade NÃO deve ser utilizada por crianças sem a supervisão de um adulto.

INSTRUÇÕES DE USO**PARA USAR EM CASA OU NO ESCRITÓRIO**

- Plugue uma extremidade do adaptador em uma tomada de energia elétrica CA de 120V e a outra extremidade na entrada do produto, localizada na parte lateral da almofada.
- Anexe sua almofada massageadora à sua cadeira para obter uma massagem de luxo enquanto lê, descansa e inclusive enquanto trabalha.

PARA USAR EM SEU CARRO

- Plugue uma extremidade do adaptador 12 Volts veicular em uma entrada CC 12V e a outra extremidade na entrada do produto, localizada na parte lateral da almofada.
- Deslize sua almofada massageadora no assento para obter uma massagem relaxante ao dirigir.

AJUSTE DE INFLAÇÃO LOMBAR

- Para inflar a almofada lombar para seu nível de comodidade, aperte repetidamente a bomba de ar (conforme figura na página seguinte) até conseguir o nível desejado.
- Para desinflar sua almofada lombar, pressione a válvula de alívio (conforme figura na página seguinte) e mantenha a pressão estável e suave ao centro da almofada, até que fique completamente vazia.

PARA LIMPAR


- Coloque o massagador em sua embalagem ou em um local seco e fresco.
- Evite o contato com bordas fibrosas ou objetos pontiagudos que podem cortar ou perfurar a superfície de tecido.
- Para evitar que se quebre, não enrole o cabo ao redor da unidade.
- Você também pode enrolar a unidade para guardá-la.
- Não separe a unidade do cabo do controle.

PARA LIMPAR

- Desconecte a unidade e deixe que esfrie antes de limpar.
- Limpe unicamente com um pano suave, apenas umedecido.
- NUNCA permita que água ou qualquer outro líquido entre em contato com o produto.
 - Não submerja em nenhum líquido para limpar a unidade.
 - NUNCA utilize produtos de limpeza abrasivos, escovas, gasolina, querosene, limpadores de vidro, lustra-móveis ou diluentes de pintura para limpar o produto.
 - Não tente reparar o massagador. Não há peças de reposição à disposição do usuário. Se necessário qualquer tipo de reparo, envie a unidade para a HoMedics conforme descrito na Garantia.

LIGA/DESLIGA

Plugue a unidade e pressione o botão de massagem para ativar o massageador. Para desligar, simplesmente pressione o botão mais uma vez.

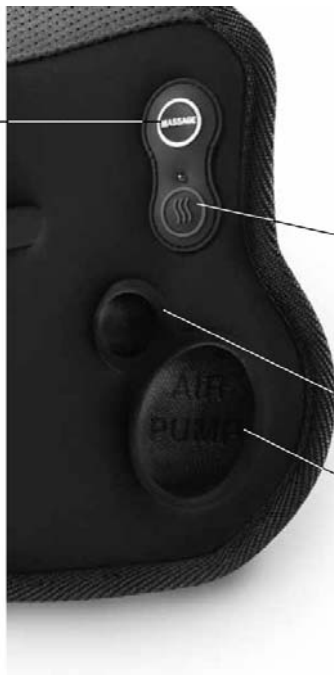

CALOR

O calor calmante se ativa pressionando este botão. O LED aceso indica que o calor está ativado. Para desligar pressione novamente o botão.

VÁLVULA DE ALÍVIO

BOMBA DE AR

ADAPTADORES DE ENERGIA

Este massageador funciona através de um adaptador de energia elétrica AC de 120V e de um adaptador veicular CC de 12V (para ser plugado ao acendedor de cigarros do veículo). Os dois adaptadores acompanham o produto.

NOTA:

Quando selecionada a característica de **CALOR** com ação massageadora, haverá uma leve perda de força na saída da massagem. Isto é perfeitamente normal e não se deve interpretar como um defeito.

NOTA

A função de **CALOR** somente funciona com a massagem ativada.

MOTORES DE MASSAGEM

Proporcionam uma massagem relaxante e energizante.

CALOR RECONFORTANTE

SUPOORTE LOMBAR COM AJUSTE MANUAL



ALMOFADA DE MASSAGEM LUMBAR AJUSTÁVEL

GARANTIA LIMITADA POR DOIS ANOS

HoMEDICS vende seus produtos com a intenção de não apresentar defeitos de fabricação nem de mão de obra por um prazo de dois anos a partir da data da Nota Fiscal de compra original, com as seguintes exceções. HoMedics dá garantia a seus produtos para que não apresentem defeitos de material nem de mão de obra sob condições normais de uso e serviços. Esta garantia se estende unicamente a consumidores e não a distribuidores.

Para obter serviço para seu produto HoMedics, entre em contato através do fone:

SAC HoMedics
11 3662.5956

Não serão aceitos pagamentos contra a entrega.

HoMedics não autoriza ninguém, incluindo, porém sem limitar-se a, distribuidores, posteriores consumidores, compradores do produto de um distribuidor, ou compradores remotos, a obrigar a HoMedics de forma alguma mais além das condições aqui estabelecidas. A garantia deste produto não cobre danos causados por uso inadequado ou abuso, acidente, conexão de acessórios não autorizados, alteração do produto, instalação inadequada, reparos ou modificações não autorizadas, uso inadequado da fonte de energia/eletricidade, corte de energia, queda do produto, funcionamento incorreto ou dano de uma peça de funcionamento devido ao não cumprimento das manutenções recomendadas pelo fabricante, danos durante o transporte, roubo, descuido, vandalismo, condições climáticas, perda do uso em um período durante o qual o produto estiver em uma seção de reparos ou a espera de peças, ou qualquer outra condição, sem importar qual seja, que esteja fora do controle da HoMedics.

Esta garantia é válida unicamente se o produto for comprado e operado no país onde foi adquirido. Um produto que requeira modificações ou adaptações para habilitar seu funcionamento em qualquer país que não seja aquele para o qual foi desenvolvido, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou o reparo de produtos danificados por estas modificações não estão cobertos por esta garantia.

A GARANTIA AQUI ESTABELECIDA SERÁ A ÚNICA E EXCLUSIVA GARANTIA. NÃO HAVERÁ NENHUMA OUTRA GARANTIA EXPRESSA NEM IMPLÍCITA, INCLUINDO NENHUMA GARANTIA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTITUDE NEM NENHUMA OUTRA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA COMPANHIA COM RESPEITO A PRODUTOS COBERTOS POR ESTA GARANTIA. HoMEDICS NÃO TERÁ RESPONSABILIDADE ALGUMA POR NENHUM DANO ACIDENTAL, CONSEQUENTE NEM ESPECIAL. SOB NENHUM CONCEITO ESTA GARANTIA REQUERERÁ MAIS QUE O REPARO OU TROCA DE ALGUMA PEÇA OU PEÇAS QUE SE ENCONTREM DEFEITUOSAS DENTRO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTA GARANTIA. NÃO SERÃO EFETUADOS REEMBOLSOS. SE NÃO HOUVER PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEIS PARA OS MATERIAS DEFEITUOSOS, HoMEDICS SE RESERVA O DIREITO DE REALIZAR SUBSTITUIÇÕES AO INVÉS DE REPARAR OU TROCAR.

Esta garantia não se estende à compra de produtos abertos, usados, reparados, embalados outra vez e/ou abertos e novamente fechados, incluindo entre outras coisas a venda destes produtos em sites de compra pela internet e/ou a venda destes produtos por revendedores autônomos.

Todas e cada uma das garantias cessarão e terminarão imediatamente com respeito a qualquer produto ou peça do mesmo que estejam reparados, trocados, alterados ou modificados sem o consentimento prévio, explícito e por escrito de HoMedics.

Esta garantia lhe proporciona direitos legais específicos. É possível que você tenha direitos adicionais que podem variar de um país para outro. Devido as regulamentações de certos países, é possível que algumas das limitações e exclusões não se apliquem em seu caso.

Para mais informações com respeito a nossa linha de produtos, visite nosso site:

www.homedics.com